


## ヨーグルト B

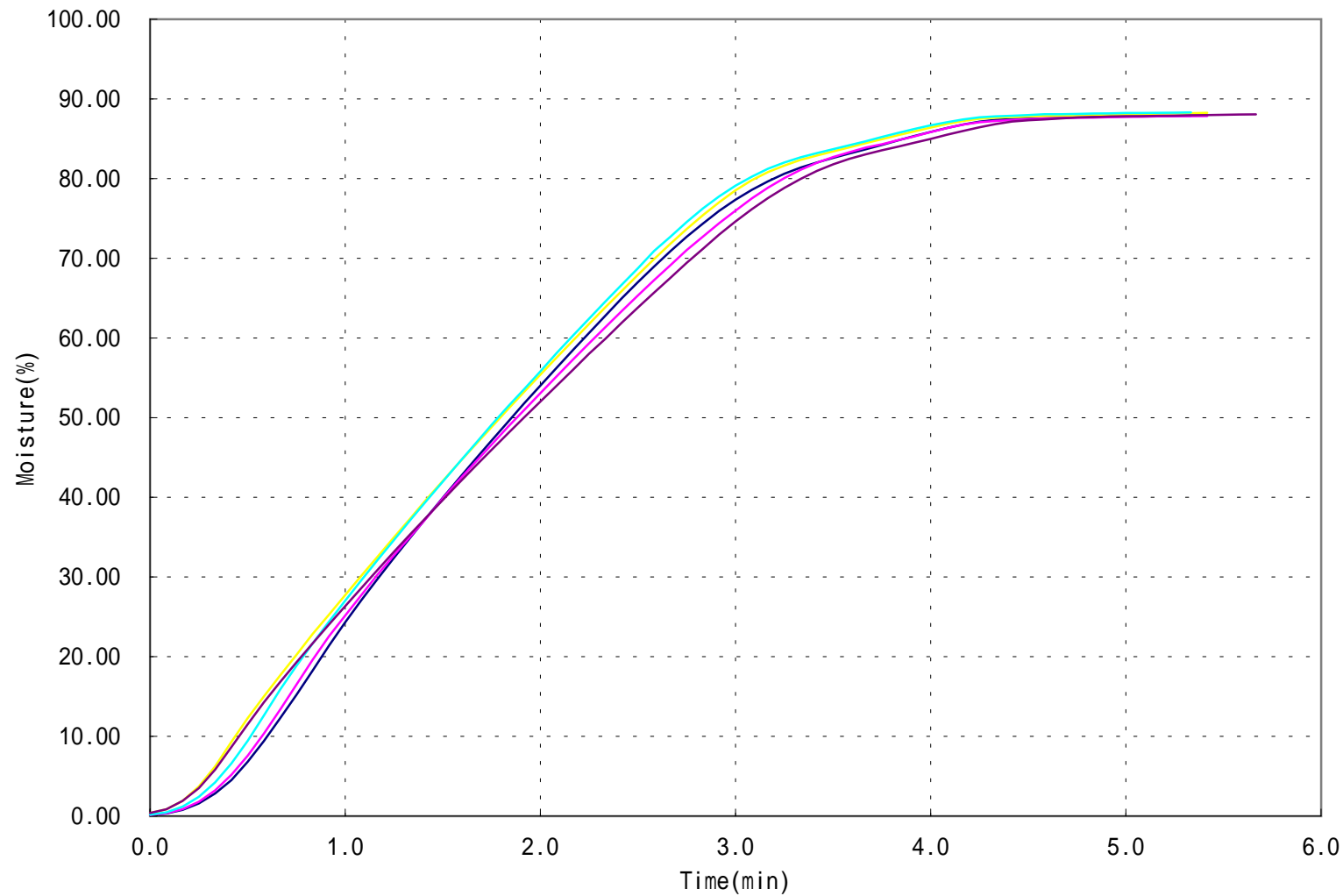

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 180  
平均測定時間 5.4分  
水分率

平均値 88.07%  
再現性 0.209%  
C V 値 0.24%

— 1回目 87.88%  
— 2回目 87.85%  
— 3回目 88.25%  
— 4回目 88.31%  
— 5回目 88.07%

備考:  
サンプルを2つ折にした  
ガラス繊維シートに挟み  
、押し付けてから開いて  
測定