


## ハチミツ(140 加熱)

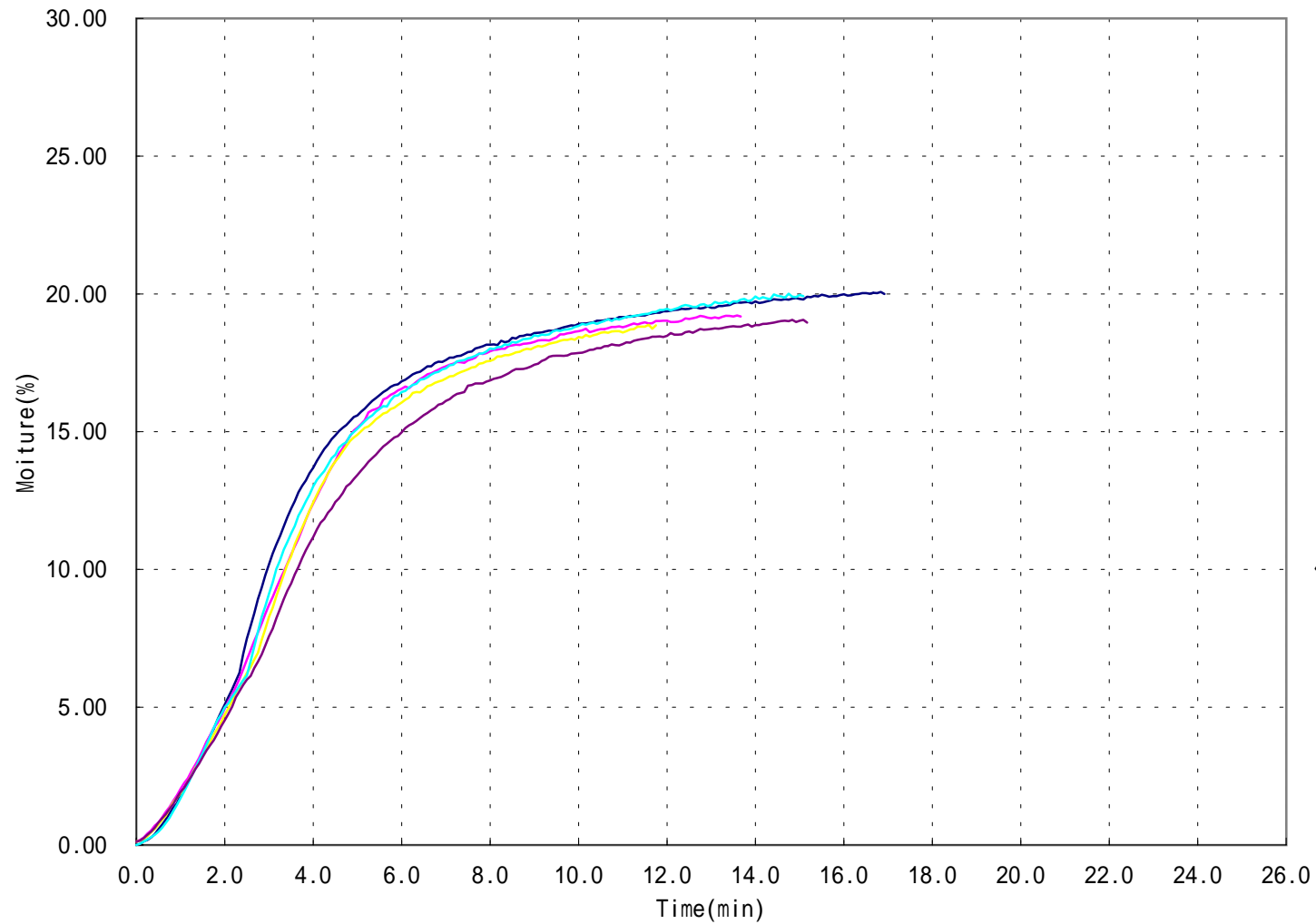

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 140  
平均測定時間 14.5分  
水分率

平均値 19.38%  
再現性 0.539%  
C V 値 2.78%

— 1回目 20.00%  
— 2回目 19.18%  
— 3回目 18.86%  
— 4回目 19.92%  
— 5回目 18.96%

備考:  
ガラス繊維シートの上に  
サンプルを載せて測定