


## 汚泥ケーキ（し尿、脱水済、ペースト）

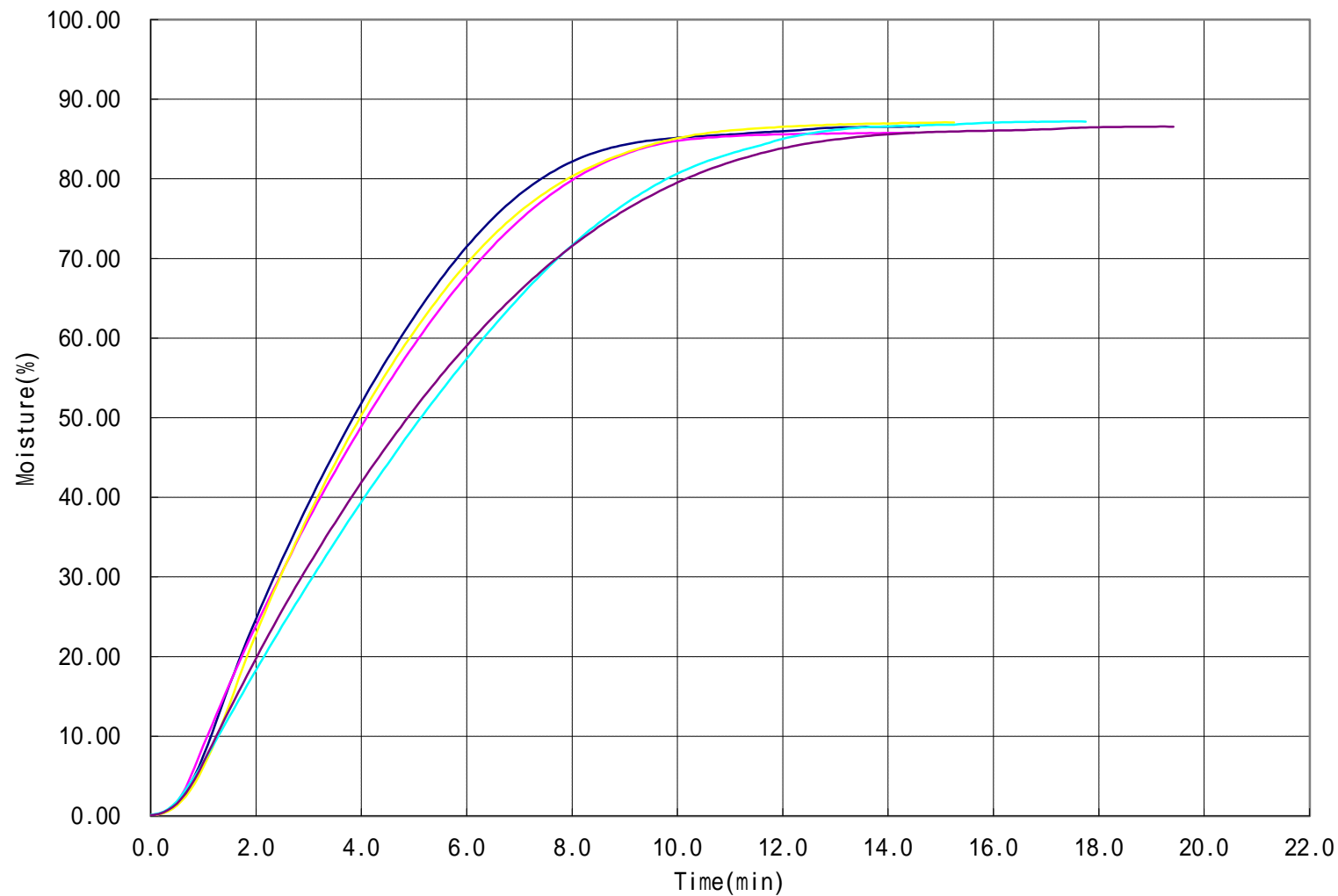

測定機種:MX-50  
測定条件:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 5g  
試料皿温度 200  
平均測定時間 16.3分  
水分率

平均値 86.64%  
再現性 0.560%  
C V 値 0.65%

— 1回目 86.58%  
— 2回目 85.78%  
— 3回目 87.09%  
— 4回目 87.19%  
— 5回目 86.56%

備考:  
加熱時匂いが強い